



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

針付プレフィルシリンジMV



品種

医療機器認証番号:303ALBZX00033000

品名	材質	サイズ	針の種類
針付プレフィルシリンジMV	ガラス	1mL long	27G 1/2" (13mm) SB
			29G 1/2" (13mm) SB
	プラスチック(COP)	1mL long	27G 1/2" (13mm) SB
			29G 1/2" (13mm) SB


- 29Gの針管内径は27Gの針管内径と同等であることから、27Gと同様の薬液排出が可能です。
- SB: Short Bevel(刃先形状)

製品構成

ガラス製シリンジ




プラスチック(COP)製シリンジ

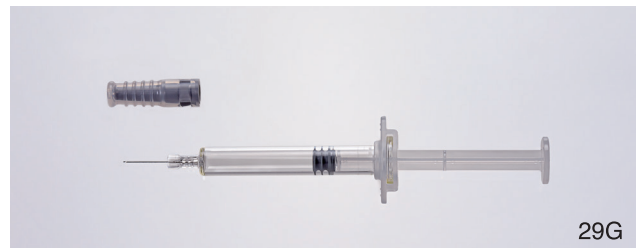

- 構成部材: プラスチックカバー付ニードルキャップ、針付シリンジバレル、ラバーガスケット、バックストップ機構付プランジャーロッド、バックストップ機構付フィンガーグリップ。
- 針付シリンジバレルは、ISO11040-4、ISO11040-6、JIS T 3210、JIS T 3209に準拠。

残液量の低減仕様 (MV:Micro Volume)

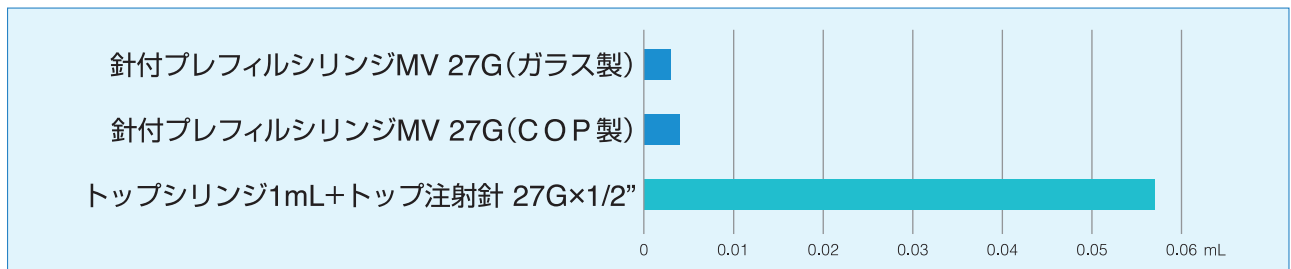

- シリンジ内のデッドスペースを抑えた針埋め込み型の構造により、薬液の残液量を低減。
- 医療現場における業務を効率化しスタッフの負担を軽減、針刺し事故や細菌汚染のリスク軽減など、医療従事者と患者、双方に対するメリットが得られます。

ネスタブ包装仕様



- ネスタブ包装による「Ready to Fill」仕様。
- ガラス製シリンジはEOGによる滅菌。
- プラスチック(COP)製シリンジはEB(電子線)による滅菌。

弊社は総合医療機器メーカーとして、確かな品質と安全性のある高付加価値デバイスをご提案いたします。製品や委託充填先の紹介に関するご質問・ご相談などが御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。

、トップ、THE TOP IN QUALITY、プレフィル、プレフィルシリンジは(株)トップの登録商標です。

製造販売業者

株式会社 **トップ**
<https://www.top-tokyo.co.jp/>

プレテック事業部

本社: 〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号
TEL:03-3882-3139 FAX:03-3882-7505

西日本営業所: 〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番21号
三宮グランドビル4階
TEL:078-230-3633 FAX:078-230-2585